

#whsterilization



video.wh.com

Now at
your dealer
or **wh.com**



Máy hình p ti t trùng New Lina

Công suất làm vi c hi u qu

Tính ti n d ng bên ngoài
Công ngh bên trong



lina

Máy tiệt trùng loại B, và rất tuyệt vời

Máy tiệt trùng loại B cho hiệu suất tốt nhất..

Để ngăn ngừa lây nhiễm bệnh, việc tiệt trùng bằng hơi nước đóng một vai trò quan trọng trong việc tái xử lý dụng cụ nha khoa. Do đó, hiệu quả và sự đơn giản là rất quan trọng. Hệ máy tiệt trùng Lina mới đáp ứng tất cả các yêu cầu này và hơn thế nữa: vận hành đơn giản, thiết kế tiện dụng và tiện dụng, chu trình khử trùng phù hợp và các chức năng có thể nâng cấp đảm bảo hiệu quả cao mang lại kết quả tối đa.



Làm gián đoạn chuỗi lây nhiễm.


Máy tiệt trùng loại B – dễ yên tâm về việc tái xử lý và ngăn ngừa lây nhiễm.

Máy hấp tiệt trùng loại B

với thời gian chu trình tốt nhất trong số các sản phẩm cùng loại.

Dễ dàng sử dụng

cho trải nghiệm người dùng mượt mà không gì sánh được.

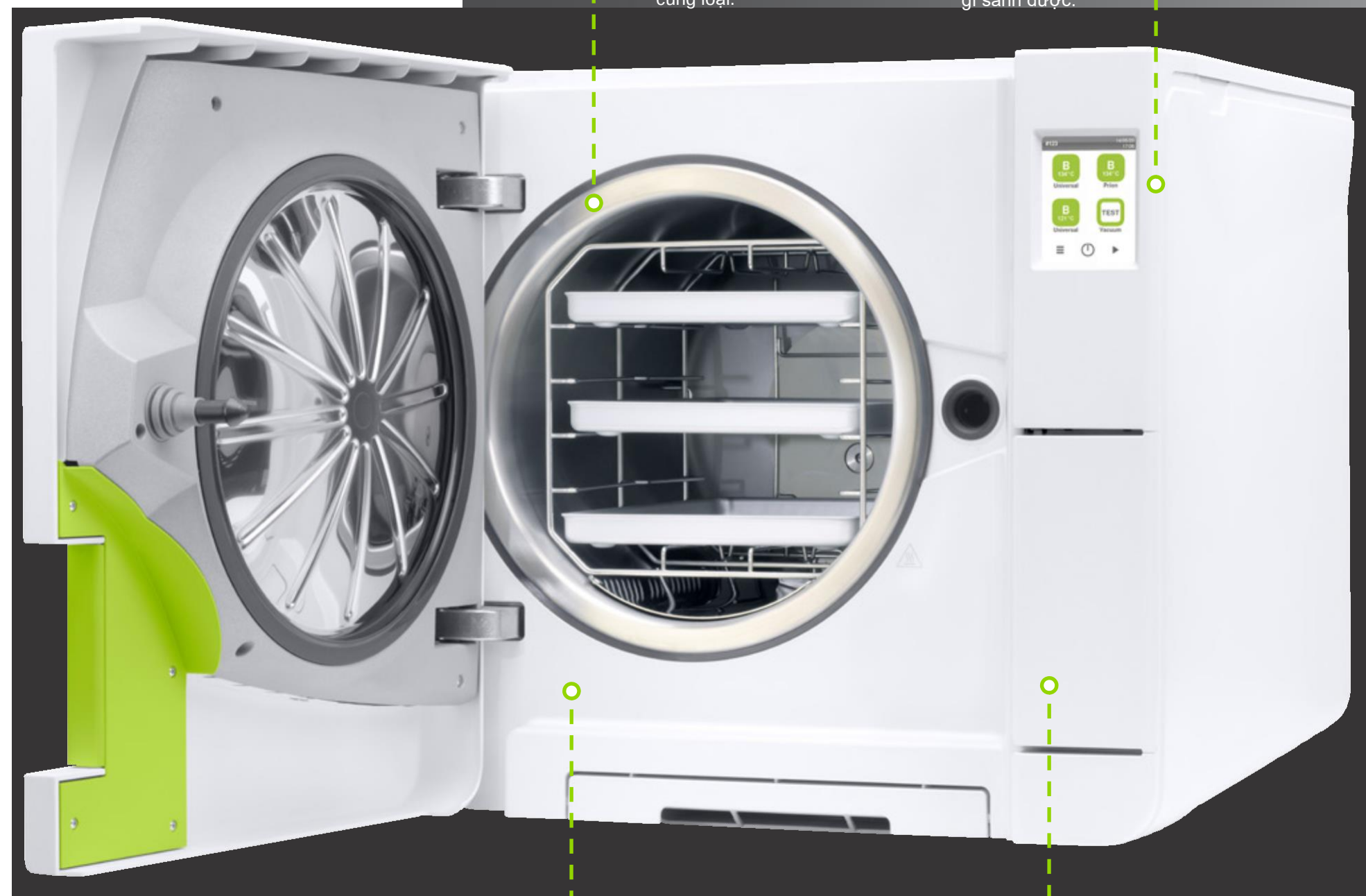

Khả năng nâng cấp độc đáo

để tùy chỉnh và hiện đại hóa thiết bị theo nhu cầu của bạn

Truy xuất nguồn gốc nâng cao để có tài liệu đầy đủ.

Các thành phần được cải tiến

Quy trình làm việc đơn giản hóa

Tính tiện dụng bên ngoài.

Máy tiệt trùng Lina được đặc trưng bởi khả năng dễ dàng thao tác, thiết kế hợp lý hóa và tiện dụng.

Lý tưởng để đơn giản hóa quá trình tiệt trùng và do đó đảm bảo quy trình làm việc hiệu quả trong phòng khám của bạn.

Bạn có thể hưởng lợi như thế nào từ tính tiện dụng được cải thiện?

Dễ dàng sử dụng

- › Màn hình cảm ứng 3,5" cho phép vận hành dễ dàng.
- › Giao diện người dùng và cấu trúc menu đơn giản hóa hỗ trợ vận hành trong mọi hoạt động hàng ngày.

Chương trình tiệt trùng tối ưu

- > Chương trình tiệt trùng Eco B xử lý 0,5 kg dụng cụ trong 25 phút.
- > Lina có thể xử lý tải trọng lên tới 6 kg đáp ứng mọi yêu cầu của phòng khám nha khoa.
- > Chu trình B Universal 121°C thậm chí còn cho phép việc tái xử lý các sản phẩm nhạy cảm nhiệt, bao gồm cả đồ xốp như quần áo phẫu thuật.

Thiết kế và bảo trì

- › Nắp bồn nước có thể tháo rời dễ dàng cho phép tiếp cận bình chứa nước mà không cần dụng cụ. Việc đổ đầy nước đặc biệt dễ dàng với phễu tích hợp.
- › Nhờ mức độ tin cậy cao, khoảng thời gian bảo dưỡng trong khoảng sau 4.000 chu trình hấp hoặc 5 năm.
- › Thiết kế gây ấn tượng với hình dáng tiện dụng và tiện dụng, đồng thời phù hợp với mọi nơi nhờ chân máy có thể điều chỉnh và bố cục nhỏ gọn.

Nguy cơ nhiễm trùng được giảm thiểu tích cực bằng cách khử trùng! Bởi vì tất cả là vì sự an toàn của bệnh nhân, nhân viên và chính bạn.

Từ khái niệm kỹ thuật Cho đến tầm nhìn hiện thực hóa

Công nghệ bên trong.
Không chỉ bề ngoài mà chuyên môn kỹ thuật bên trong cũng tạo nên sự khác biệt. Máy hấp tiệt trùng Lina dựa trên ý tưởng kỹ thuật tinh vi mang đến những khả năng hướng tới tương lai và đơn giản hóa đáng kể quy trình làm việc của bạn.

Sử dụng các cải tiến về công nghệ để vượt qua mọi thử thách với máy hấp tiệt trùng của bạn – hôm nay và ngày mai!

Bạn có thể được hưởng lợi như thế nào từ công nghệ tiên tiến?



Truy xuất nguồn gốc nâng cao

- › Dữ liệu chu trình nắp được lưu tự động qua USB dung lượng cao.
- › Máy in nhãn mã vạch cung cấp hỗ trợ bổ sung về truy xuất nguồn gốc nhờ liên kết chu trình, bao tiệt trùng và bệnh nhân.
- › Máy in báo cáo chu trình đảm bảo có đầy đủ dữ liệu về chu trình.




Kết nối nâng cao

- > Hệ thống ioDent® cung cấp các giải pháp nha khoa thông minh và cho phép hỗ trợ dịch vụ nâng cao.
- › Ứng dụng W&H Steri cho phép điều khiển và giám sát máy tiệt trùng từ xa. Hơn nữa, việc sao lưu lịch sử chu kỳ được lưu trên điện thoại thông minh đảm bảo an toàn hơn.

Khả năng nâng cấp độc đáo


Hệ thống Mã kích hoạt là một công cụ có khả năng nâng cấp sáng tạo. Mã kích hoạt mang lại cơ hội phù hợp để nâng cao các tính năng bổ sung đáp ứng nhu cầu thực hành của bạn và tuân thủ các yêu cầu trong tương lai. Hiệu quả, dễ tùy chỉnh và nâng cấp máy tiệt trùng Lina của bạn..

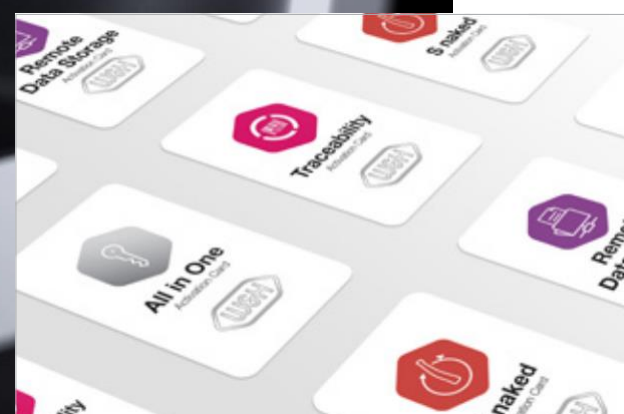

Khả năng nâng cấp độc đáo

Đáp ứng nhu cầu cá nhân.

Nhu cầu và yêu cầu có thể thay đổi. Hãy chuẩn bị ngay bây giờ: với hệ thống Mã kích hoạt, các chức năng bổ sung có thể được kích hoạt để đáp ứng nhu cầu thực hành đang thay đổi của bạn và các yêu cầu trong tương lai.

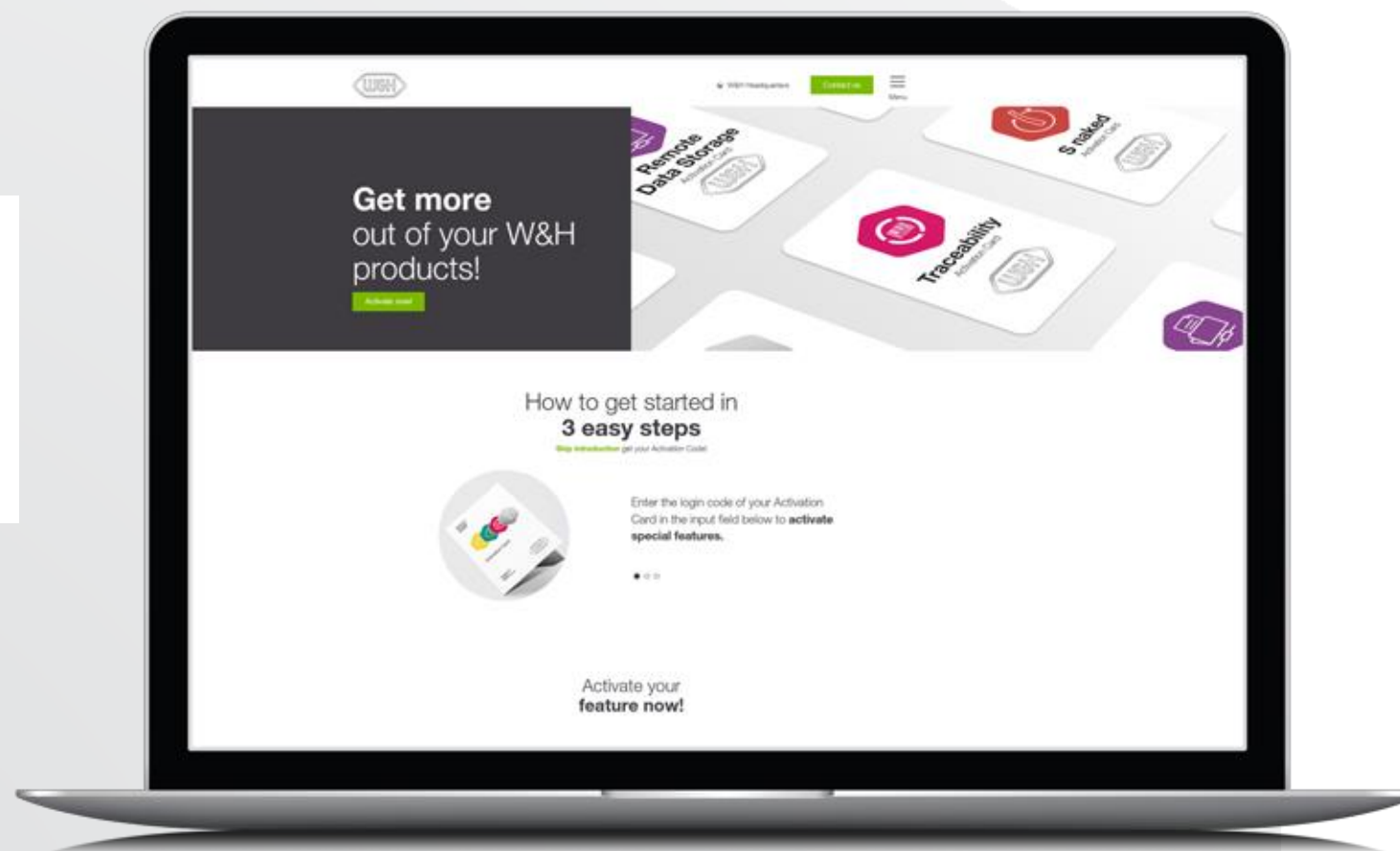

S naked

Tính năng chu trình “S Naked” đảm bảo tốc độ tối đa cho việc tái xử lý các tay khoan không đóng gói.



Lưu trữ dữ liệu từ xa

Tính năng “Lưu trữ dữ liệu từ xa” là sự bổ sung lý tưởng cho dữ liệu về chu trình kỹ thuật số. Nó cung cấp khả năng lưu chu kỳ trực tiếp trên PC.



Truy xuất

Tính năng “Truy xuất nguồn gốc” cho phép nhận dạng người dùng và xác nhận l61y dụng cụ. Việc nhận dạng được bảo mật bằng mã PIN trực tiếp trên máy tiệt trùng Lina và Ứng dụng W&H Steri.



Tính năng “Tắt cả trong một” mang đến tất cả các tiện ích cùng một lúc – và cuối cùng máy hấp tiệt trùng của bạn sẽ trở thành một tỷ lệ hoàn hảo giữa hiệu suất và chi phí đầu tư.

Sáu bước để có được máy hấp tiệt trùng tùy chỉnh của bạn:

Bước 1

Mua Mã kích hoạt mà bạn chọn từ nhà cung cấp sản phẩm được phê duyệt tại địa phương.

Bước 2

Sau khi bạn đã nhận được mã đăng nhập liên quan, hãy truy cập activate.wh.com

Bước 3

Nhập mã này cùng với số sê-ri và kiểu máy hấp tiệt trùng của bạn.

Bước 4

Kích hoạt cá nhân, an toàn của bạn Mã được tạo ra.

Bước 5

Nhập mã này vào menu của máy hấp tiệt trùng Lina của bạn.

Bước 6

Tính năng này sẵn sàng.




Quy trình tái xử lý Hoàn hảo

Tiệt trùng, vệ sinh và bảo trì ngày càng quan trọng trong thực hành nha khoa. W&H cung cấp các quy trình vệ sinh thực hành tốt nhất như một giải pháp hoàn chỉnh để tái xử lý dụng cụ và tay khoan của bạn.



Các phụ kiện toàn diện

W&H cung cấp nhiều loại phụ kiện để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn. Các tính năng bổ sung nhỏ dẫn đến hiệu quả tối ưu. Làm việc trong thực tế dễ dàng hơn và nhóm làm việc của bạn tiết kiệm được thời gian.

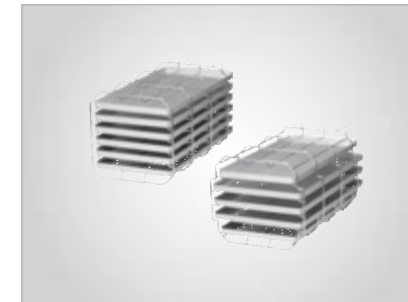

Giá đỡ có thể đảo ngược
Giá đỡ tốt nhất cho dụng cụ của bạn:
> cho 3 khay lớn và 2 khay tiêu chuẩn hoặc 3 khay cassette
> cho 6 khay hoặc 3 băng cassette



Máy scan bar code
Điều này cho phép bạn quét nhãn dụng cụ hấp vào hồ sơ bệnh nhân.



Máy in chu trình hấp
In các giao thức chu trình trên giấy nhiệt có bảo hành giấy 10 năm.



Máy in nhãn mã vạch
Máy in nhãn có thể được kết nối với máy hấp tiệt trùng để in mã vạch. Kết hợp với bộ ghi dữ liệu tích hợp, nó sẽ cải thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc của bạn. Máy in nhãn là một công cụ nhanh chóng và dễ dàng để liên kết chu trình khử trùng với hồ sơ bệnh nhân.



Multidem
Multidem cung cấp nước khử khoáng để tạo hơi nước cho máy hấp và có thể được sử dụng cho nhiều máy tiệt trùng và máy tiệt trùng thông thường. các hoạt động hàng ngày khác như rửa dụng cụ. Kết quả là, nó đảm bảo hiệu suất ổn định và tối ưu hóa, từ đó kéo dài tuổi thọ của máy tiệt trùng.



Seai² và SeaiVa²
Máy đóng gói W&H tạo ra một đường ép rộng 12 mm chỉ trong hai giây mà không có nguy cơ làm cháy bao tiệt trùng. Sự bảo vệ tuyệt đối kín đáo và chắc chắn của hàng hóa tiệt trùng khỏi ảnh hưởng của môi trường đảm bảo tính vô trùng liên tục.

Thông số kỹ thuật

Chu trình hấp		B Universal 134		B Prion 134		B Universal 121	S naked 134 (optional –Tùy chọn)	
Nhiệt độ:		134°C		134°C		121°C	134°C	
Thời gian tiệt trùng (phút)		4'		18' 30''		20' 30''	4'	
Tổng thời gian chu trình (phút) bao gồm sấy khô:		Tự động từ	Thông thường	Tự động từ	Thông thường	Tự động từ	Tự động từ	
	Lina 17	25'–49'	45'	40'–64'	60'	63'–71'	20'–26'	
	Lina 22 (220 V)	28'–52'	48'	43'–67'	63'	65'–74'	21'–27'	
	Lina 22 (110 V)	33'-63'	55'	47'-77'	69'	73'-82'	28'-35'	
Tải trọng hấp Lina 17 :		Tối đa 3.5–5.5(1) kg/thông thường 2 kg/vật liệu xốp tối đa 0.5–1.5(2) kg						tối đa .4 kg không đóng gói
Tải trọng hấp Lina 22:		Tối đa 4–6(3) kg/thông thường 2 kg/ vật liệu xốp tối đa 0.5–2(4) kg						tối đa .4 kg không đóng gói
Lina 17/22 sức chứa:		Tối đa 6 kg						
Chu trình test:		Helix/Bowie and Dick/Vacuum						
Phụ kiện được cung cấp kèm theo: giá đỡ đảo chiều, 3 khay nhôm, ống thoát nước, giá đỡ khay, USB 8 GB, dụng cụ mở cửa, kiểm tra của nhà máy								

- (1) Thời lượng được báo cáo trong bảng đề cập đến 3,5 kg. Có thể tiệt trùng tới 5,5 kg bằng cách kéo dài thời gian sấy.
(2) Thời lượng được báo cáo trong bảng đề cập đến 0,5 kg. Có thể tiệt trùng tới 1,5 kg bằng cách kéo dài thời gian sấy.
(3) Thời lượng được báo cáo trong bảng đề cập đến 4,0 kg. Có thể tiệt trùng tới 6,0 kg bằng cách kéo dài thời gian sấy.
(4) Thời lượng được báo cáo trong bảng đề cập đến 0,5 kg. Có thể tiệt trùng tới 2,0 kg bằng cách kéo dài thời gian sấy.



	Lina 17	Lina 22
Series:	Lina	Lina
Type:	RIK-117	RIK-122
Buồng hấp:	17 l	22 l
Điện nguồn:	200–240 V AC; 50 Hz or 60 Hz; 10 A -1 pha	100–125 V AC; 50 Hz/60 Hz; 12 A – 1 pha
Công suất tiêu thụ:	2.0–2.4 kW	110 V: 1.2 - 1.5 kW 220 V: 2.0 - 2.4 kW
Kích thước tổng thể (R × C × S):	465 × 452 × 646 mm	
Trọng lượng (máy trống):	40 kg	42 kg
Main/used water tanks:	4.8/4.8 l	
Chu trình làm việc khi đồ đầy nước:	7 đến 10 chu trình	
Không gian có thể sử dụng trong buồng hấp (R × C × S) ⁽¹⁾ :	195 × 195 × 312 mm	195 × 195 × 400 mm
Loại kết nối:	1 cổng USB phía trước máy (thêm 1 cổng phía sau optional nếu có nhu cầu), bộ làm đầy nước tự động (optional)	

(1) Không gian sử dụng được đề cập đến cấu hình giá tiêu chuẩn

Máy tiệt trùng Lina được thiết kế, chứng nhận và xác nhận với các chỉ thị và tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất			
N°2017/745	Quy định về thiết bị y tế	IEC 61326-1	Tương thích điện từ
2014/68/EU	Hướng dẫn về thiết bị áp suất	IEC 61010-1	Yêu cầu an toàn tiệt trùng
EN 13060	Máy hấp tiệt trùng loại nhỏ	IEC 61010-2-040	Yêu cầu cụ thể đối với máy tiệt trùng hơi nước
IEC 61770	Các thiết bị điện nối với nguồn nước	> Máy tiệt trùng có thể được chứng nhận theo EN ISO 17665-1	

W&H Sterilization Srl.
Vía Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Pictures are for illustrative purposes only. Additional equipment and accessories shown are not included as standard.

20535 AEN Rev. 002 / 26.05.2021
Subject to alterations